



3DISC, merkezi Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da bulunan IOS üreticisi ve dijital diş hekimliği çözümleri sağlayan küresel bir markadır. Dijital diş hekimliği alanını öncü kılma misyonuna adanmış çok disiplinli bir Ar-ge ekibi olarak 2010 yılında yolculuğuna başlayan 3DISC, 8 yıllık yoğun geliştirme çabalarının ardından HERON IOS'u dental pazara sunmuştur.

Diş klinikleri 3DISC'i tercih ettiğinde, bu çözümlerin sürekli güncelleneceğine güvenebilirler. Bu durum onların günlük rutinlerine kolaylık sağlamaya ve hastalarına en yüksek kalitede tedavi sağlama konusunda güç kazandırmaya yardımcı olacaktır.

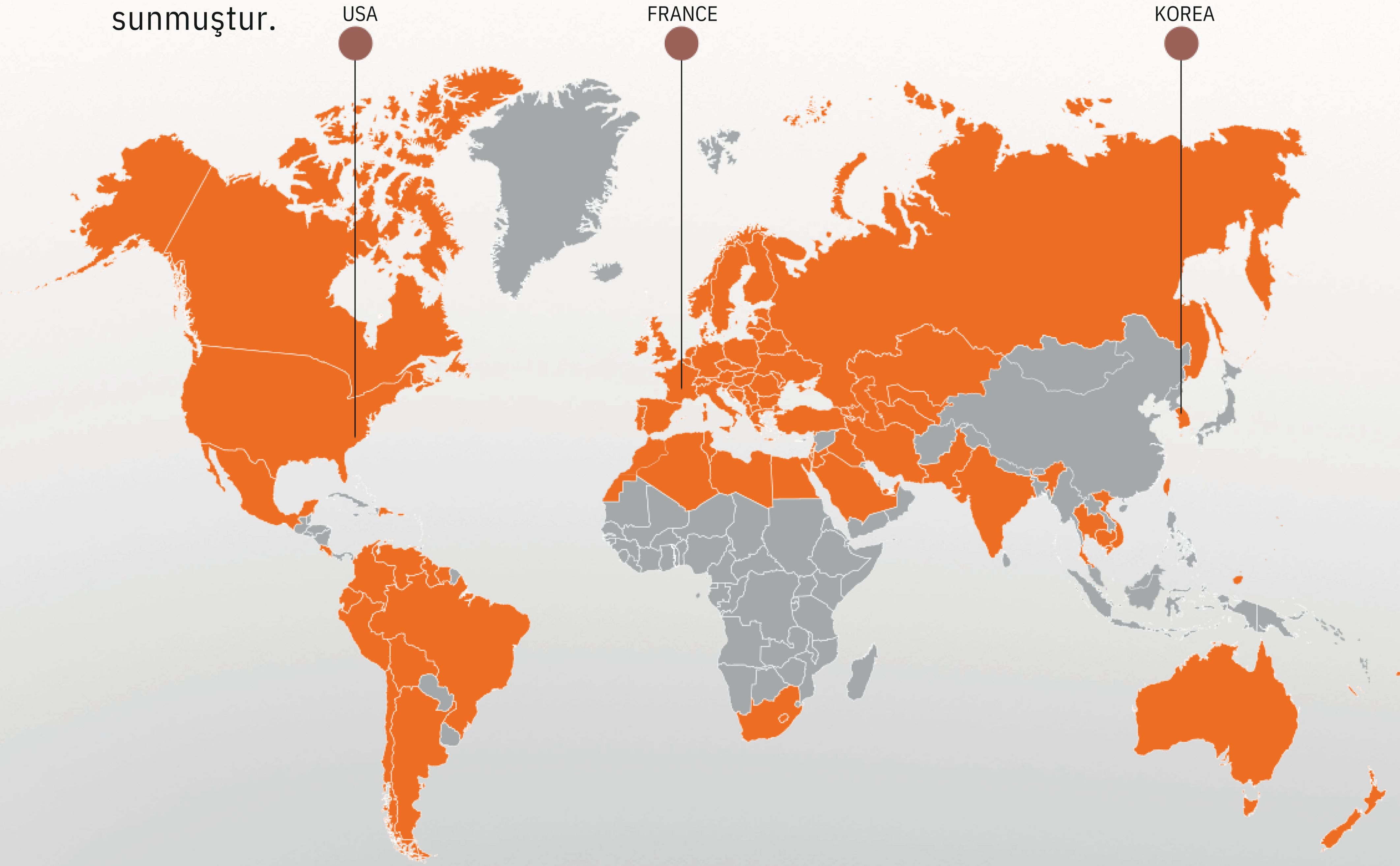

HERON IOS İLE KOLAYLIKLA TARAMANIZI YAPIN

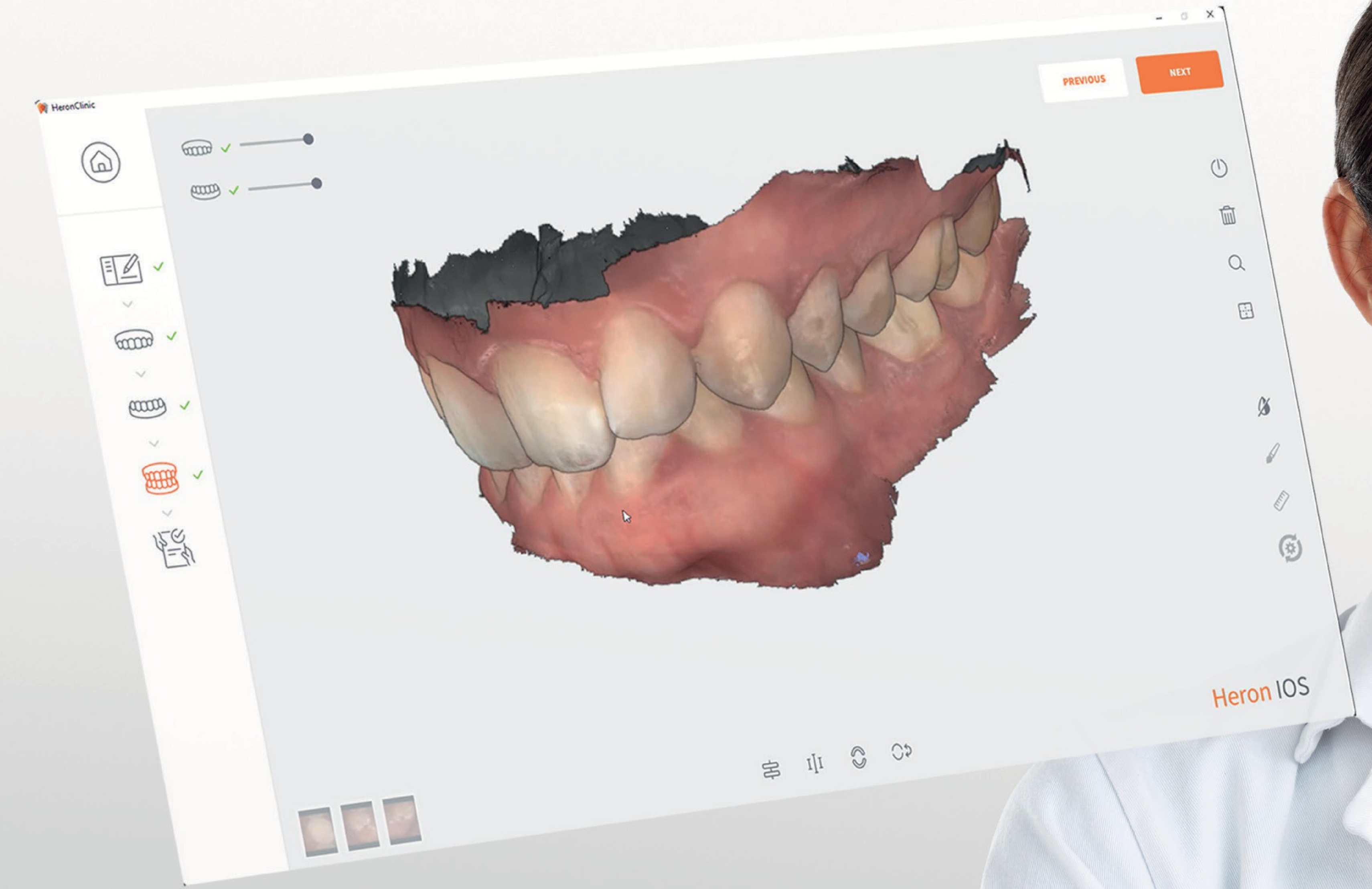

Heron IOS, basitten tam diřsiz restorasyonlara kadar tüm yenileme süreçlerinde *yanında*

Heron IOS'un sezgisellięi ve kolaylıęı sayesinde, bu tarayıcı uzmanlara ve yeni kullanıcılara uygun olarak tasarlanmıştır, bu da onların diř kliniğinde karşılaştıkları günlük sorunlarla başa çıkmalarına olanak tanır. "Başlamak için 2 tıklama, tarama için 2 dakika, kontrol etmek için 2 saniye" metodolojisi, uygulayıcıların güne hızlı bir başlangıç yapmalarına ve daha fazla odaklanmalarına yardımcı olur. Kısa sürede ve kolayca taramak, dijital diř hekimliğine sorunsuz bir geçişin anahtarıdır.

**KOLAYLIKLA
TARAYIN**

**2
TIKLAMA İLE
BAŞLAYIN**


**2
DAKİKADA
TARAYIN**

**2
SANİYEDE
KONTROL
EDİN**



3DiscClinic Yazılımı, sizi yönlendirirerek zorlu vakalarda bile güvence verir.

3DiscClinic, kapsamlı dijital araç seti ile diş hekimine optimal bir tarama alma sürecinde rehberlik eder. Günlük kullanımda diş hekimine güvence sağlar ve basit restorasyonlardan en zorlu vakalara kadar hasta konforunu ve hassas restorasyonlarını garanti eder.

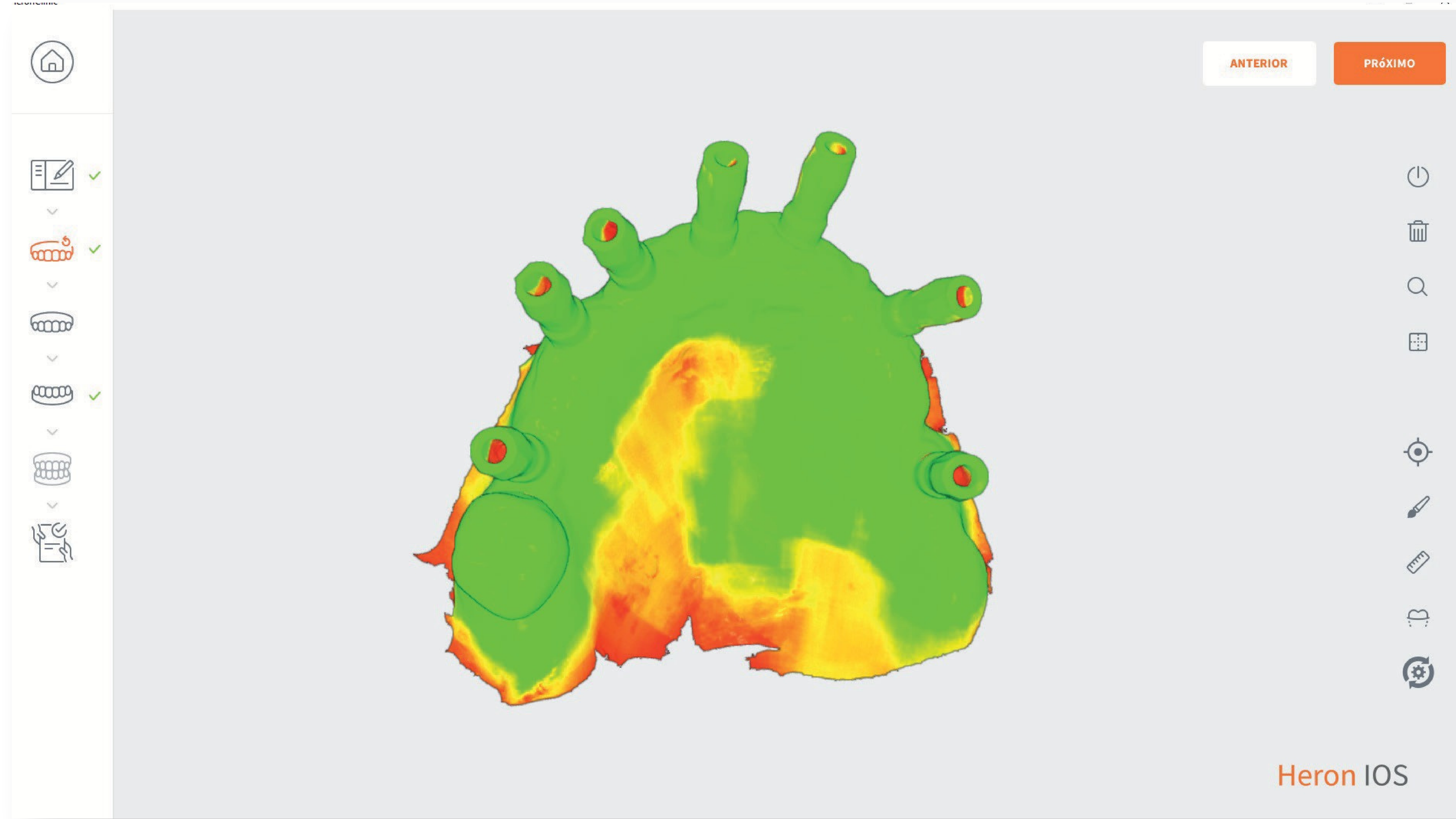


KALİTE HARİTASI

Anında tarama kalitesi kontrolü ve gerektiğinde canlı tekrar tarama olanağı sunan özel bir araçtır.


OKLÜZAL KLİRANS

Bu araç, vakayı dışa aktarmadan önce klirans'ı kontrol etmenize yardımcı olarak kron ve köprü hastalarınızı etkili ve öngörülebilir bir şekilde tedavi etmenize yardımcı olur.

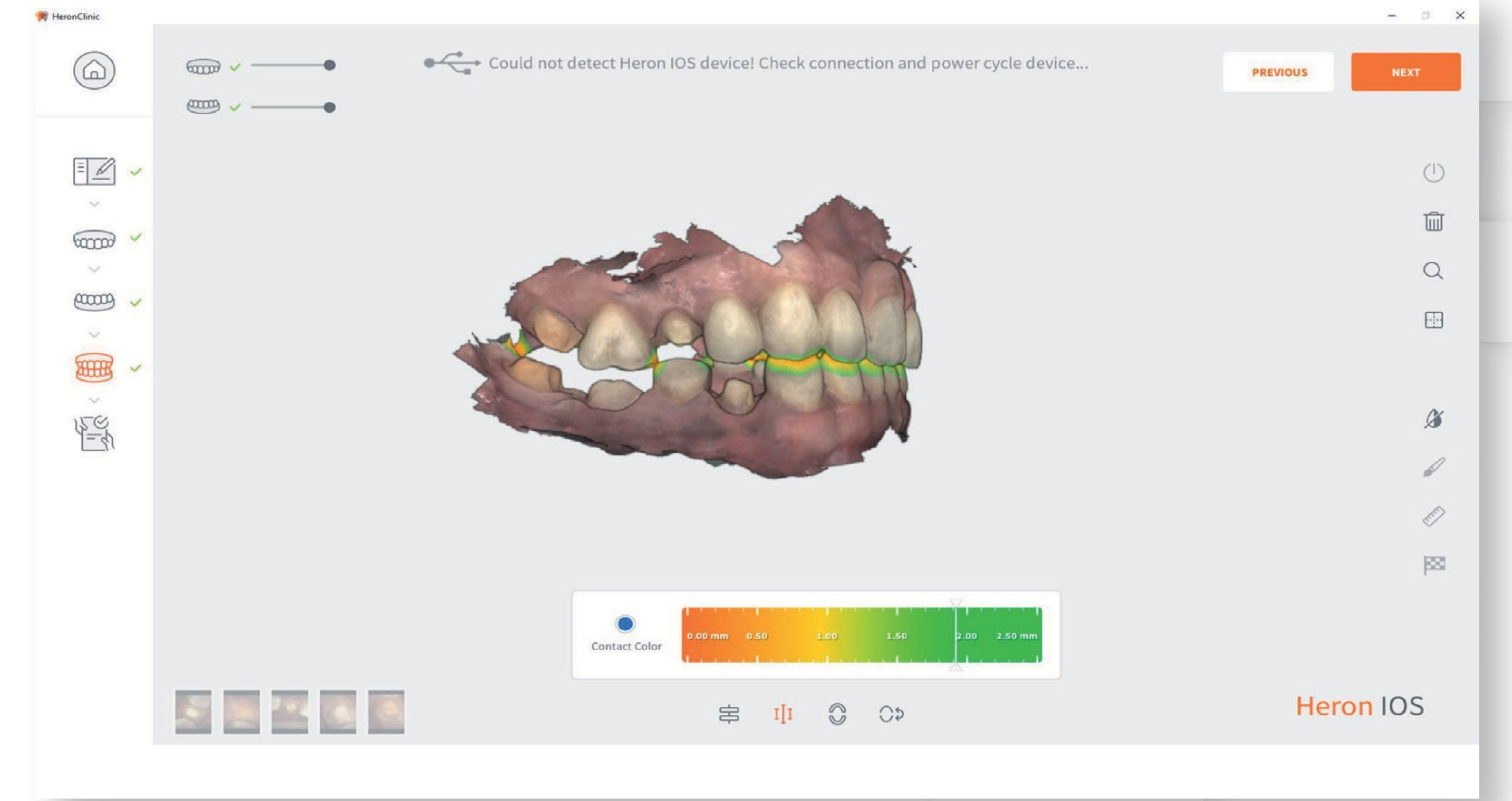


CANLI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ


Canlı Ekran Görüntüsü aracı, tarama süreci sırasında ekran görüntüleri almanıza olanak tanır. Bu görüntüler, Vaka İncelemesi ve nihai Dışa Aktarma işlemlerine dahil edilerek, sorunlu bölgeleri belirlemenizi ve tedavi ilerlemesini izlemenizi sağlar. Ayrıca, diş dokusu, kenar tanımlamaları gibi konularda teknisyenlere değerli bilgiler sağlar.

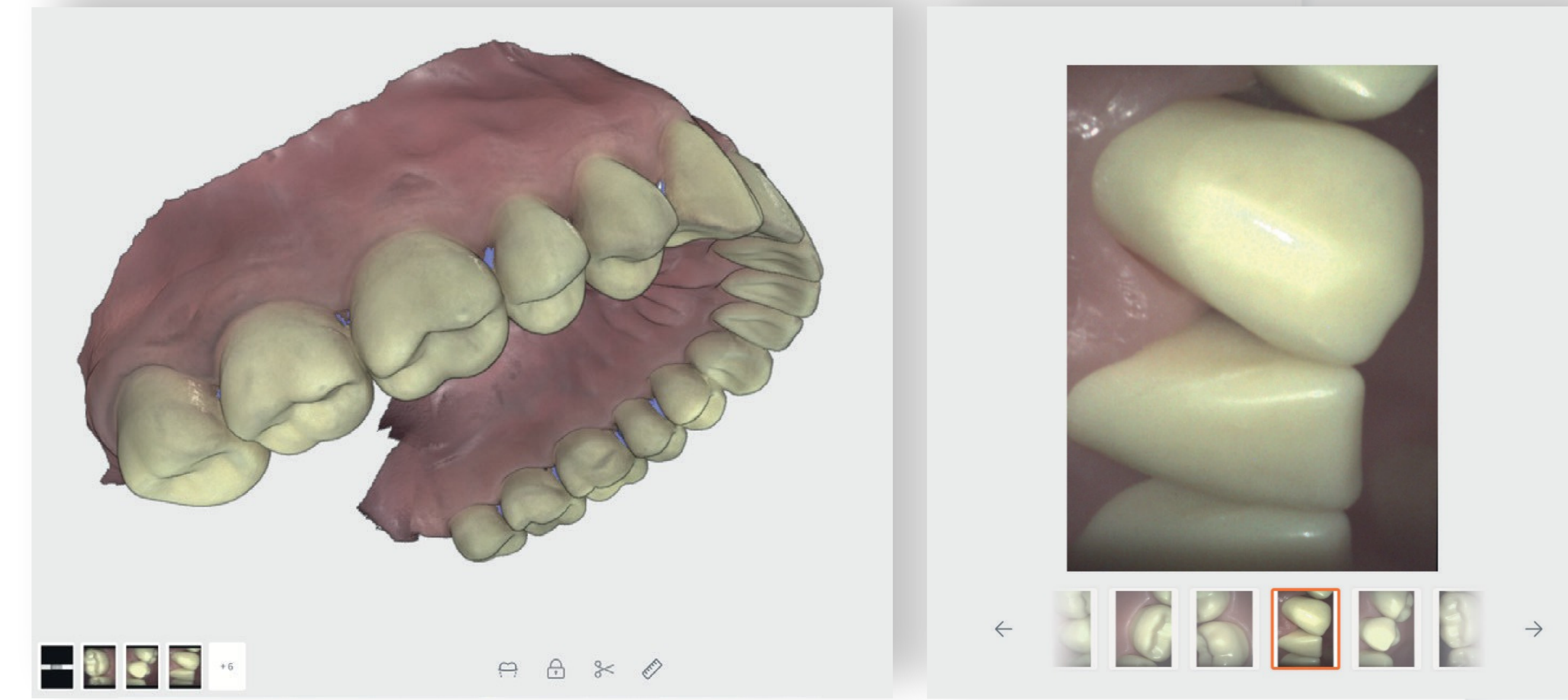

UNDERCUT KOMUTU

Bu komut, hazırlığınızın kalitesini doğrulamanıza ve belirlemenize yardımcı olarak restorasyonlar için ideal uyum sağlamak amacıyla kullanılır.

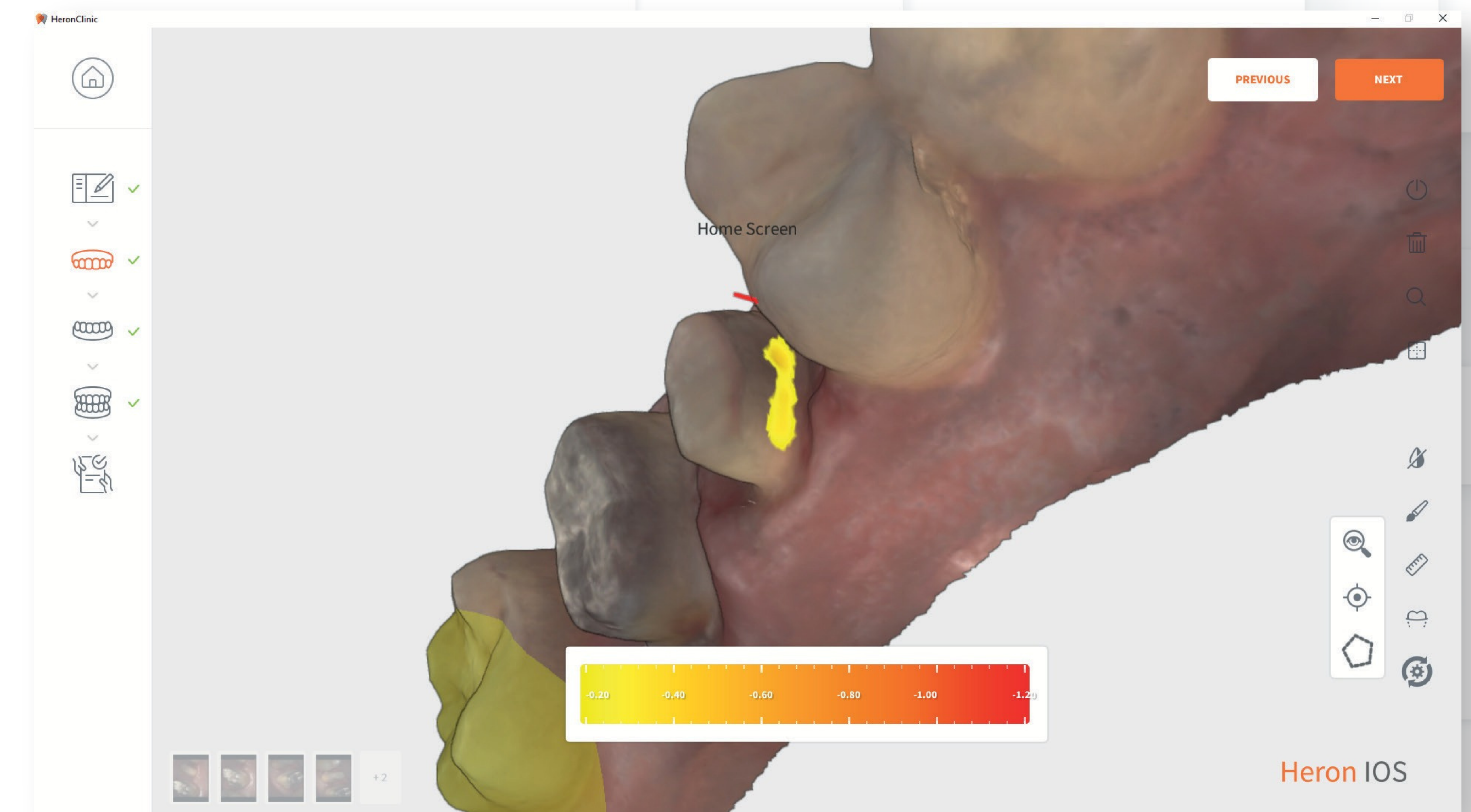

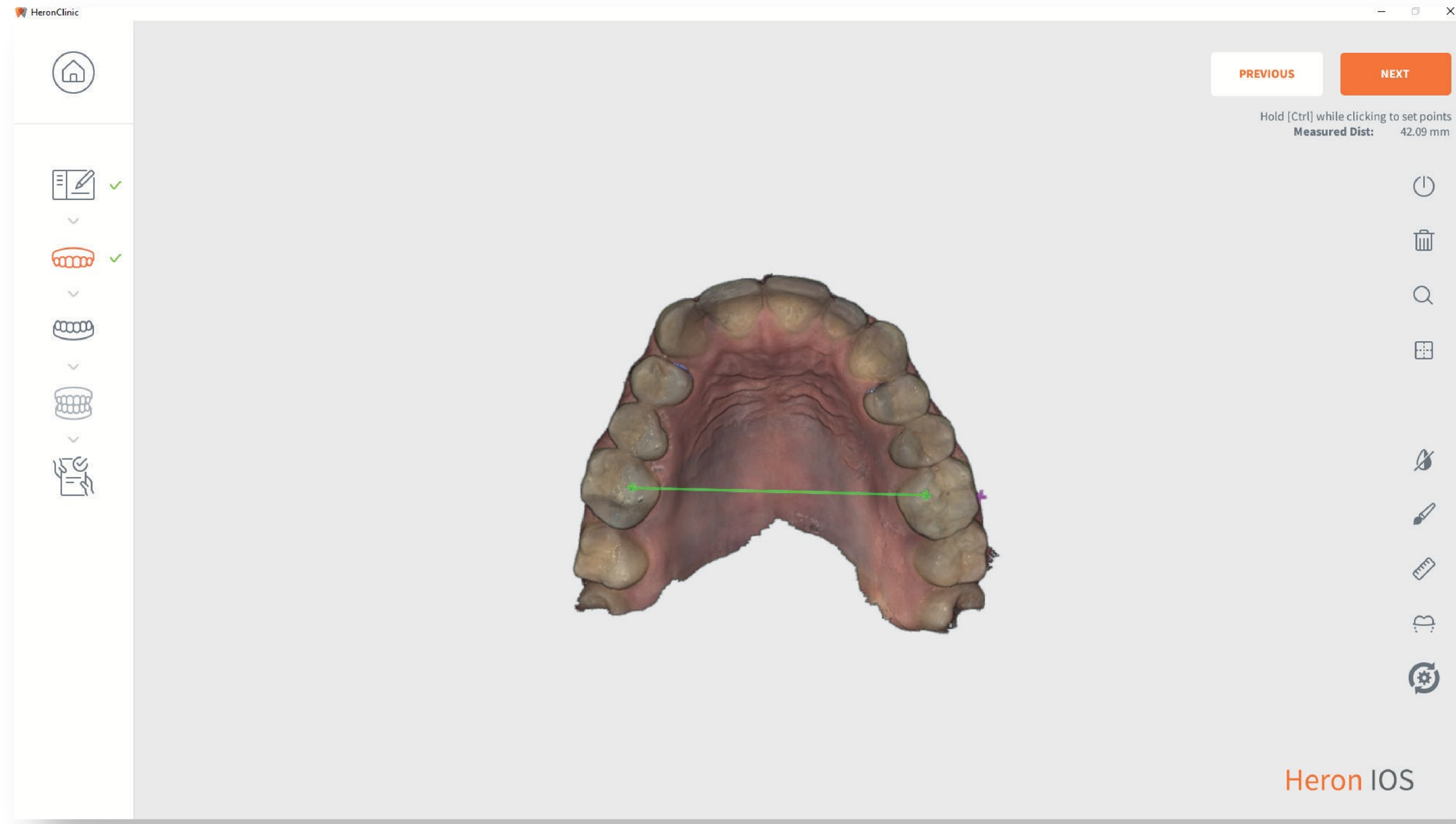

ÖLÇÜM KOMUTU

Bu araç, iki nokta arasındaki mesafeyi doğru bir şekilde ölçmenize yardımcı olur. Ortodontik tedavilerde;

- İlk teşhis,
- Tedavi planlaması,
- Tedavi ilerlemesinin izlenmesi,
- Tedavi sonucunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.




MODEL STÜDYO

"Model Studio" aracı, kullanıcı dostu bir iş akışıyla AI teknolojisini kullanarak dakikalar içinde diş modelleri oluşturur. Bu STL modeller, sadece bir tıklama ile 3DISC taramalarından otomatik olarak üretilir.




KESİT ARACI

2D görüntüyü büyötmek için, 2D görüntünün sağ üst köşesinde bulunan "maksimize simgesi"ne tıklayın. Bu eylem, 2D ve 3D görüntüleri yan yana gösterir.

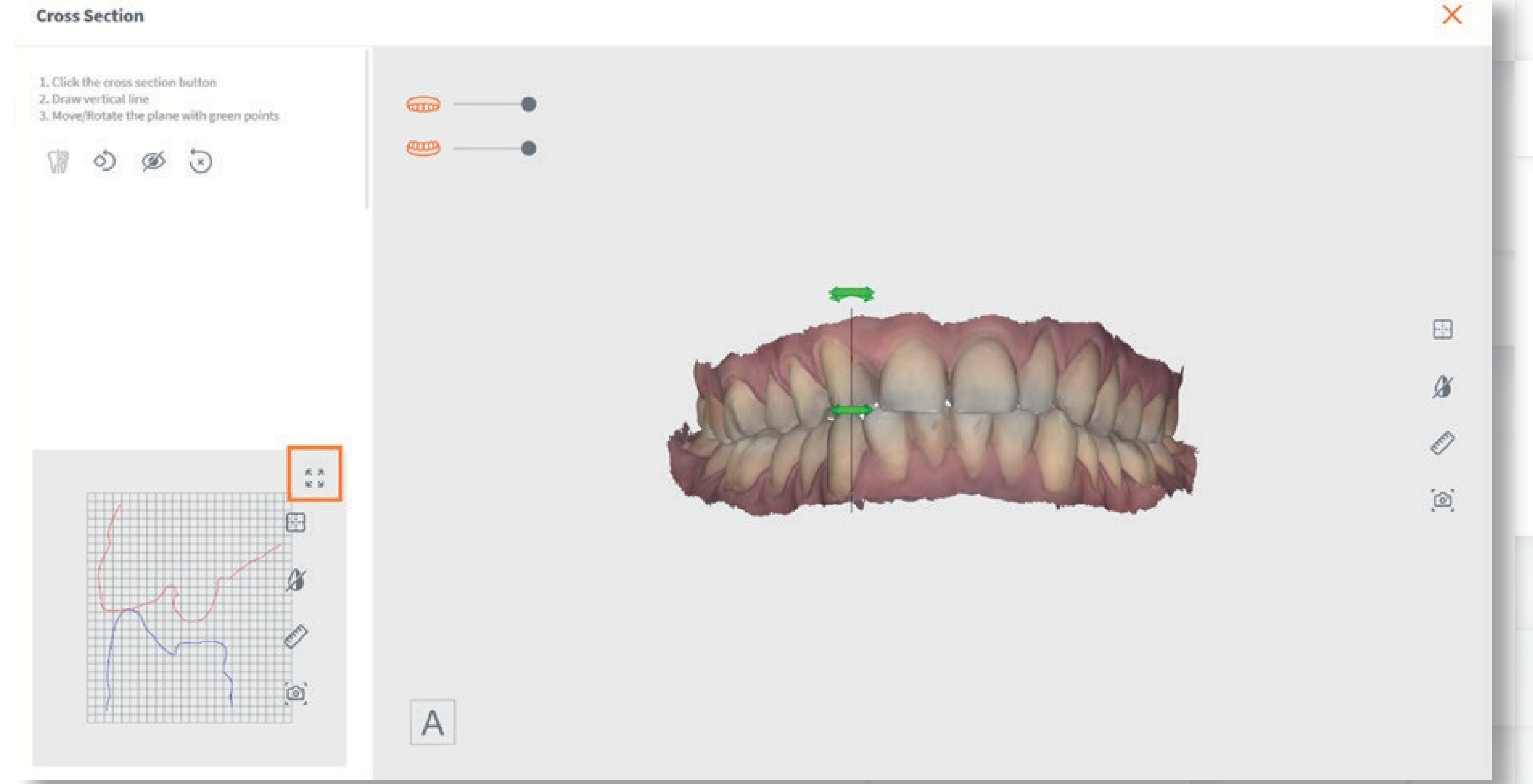



Kesit çubuğundaki çeşitli araçlar, çizdiğiniz kesit çizgisi boyunca modeli kesmenize olanak tanıyarak 3D görünümünüzü geliştirmek için tasarlanmıştır.

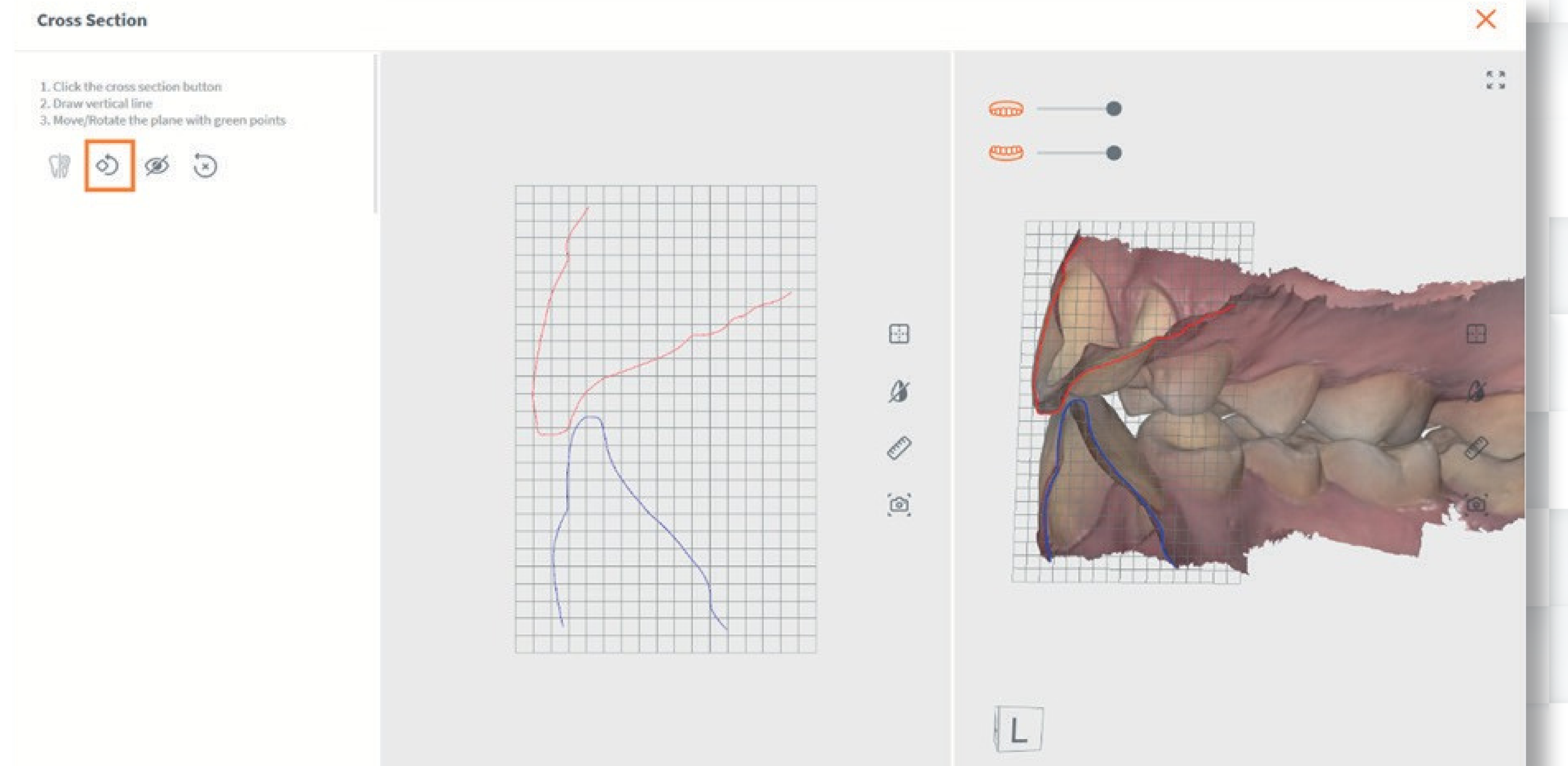

Kullanıcılar iki seçenekten birini seçebilir.

Base Model


Filled Model

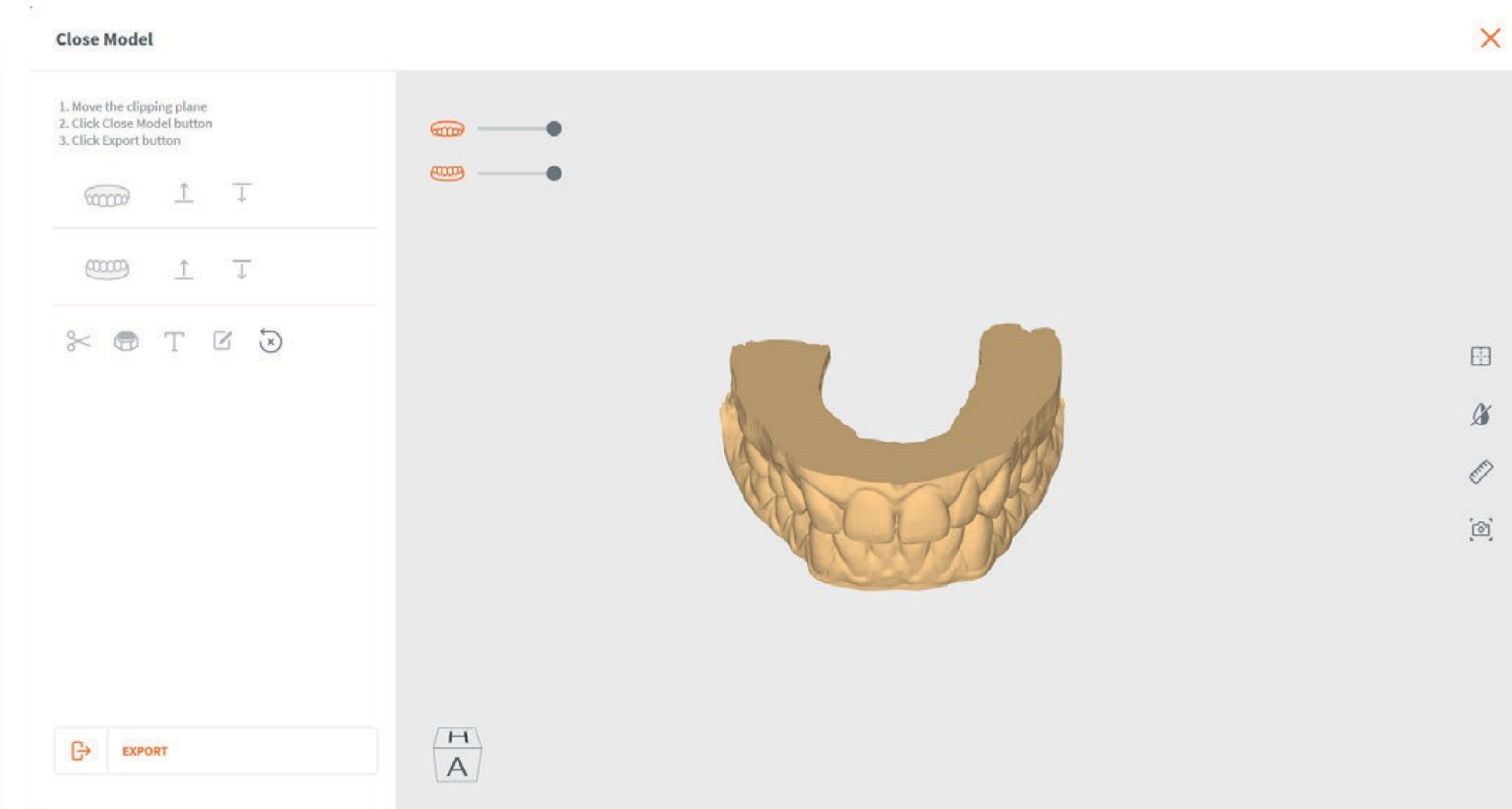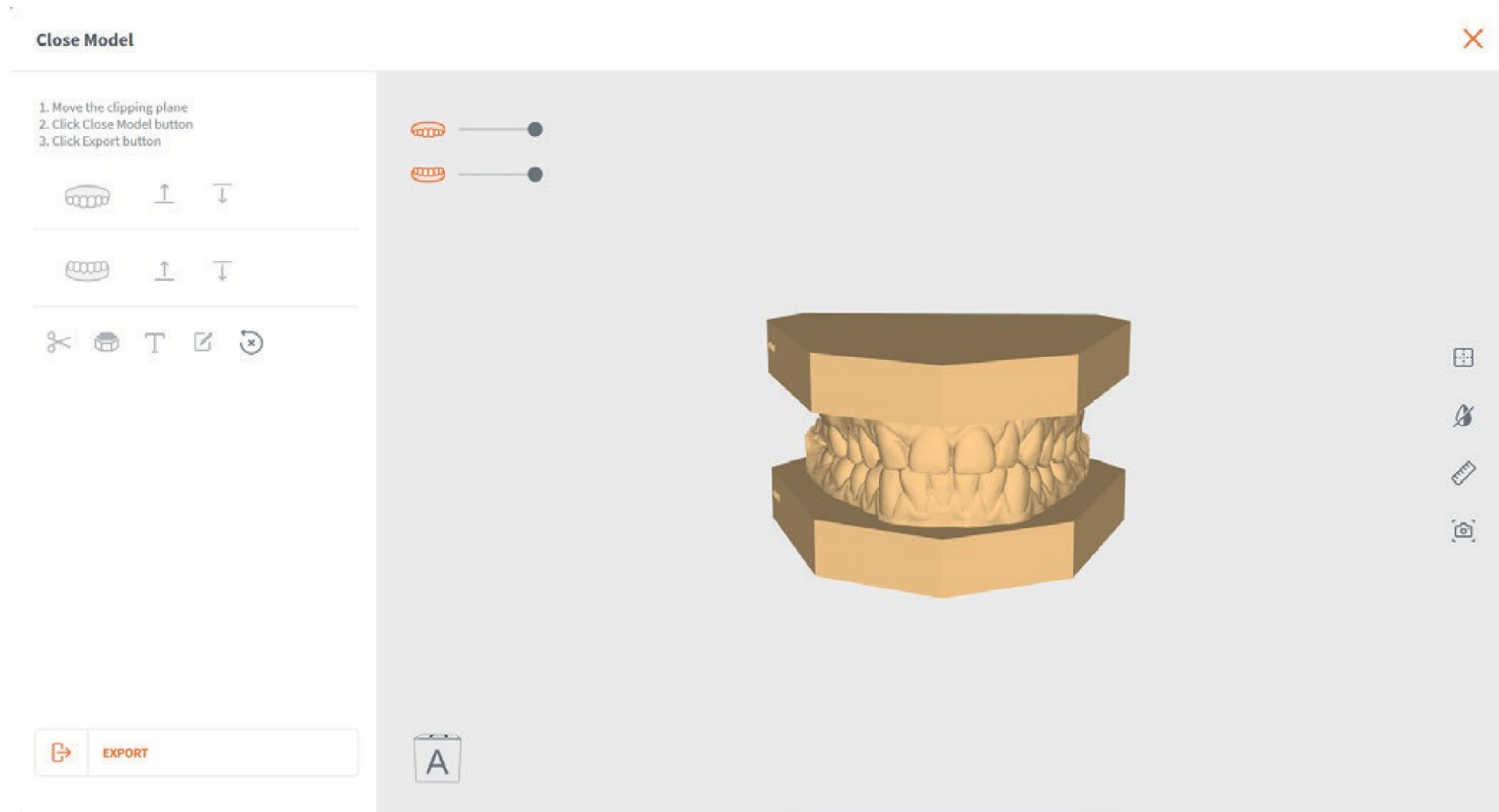

software
3DiscClinic

So Fast. So Fluid. So Fly AI

- Fly **AI** ile tanışın. Verilerin sorunsuz bir şekilde bir araya gelme şeklini dönüştürüyor.
- Fly **AI**, diğer tarayıcılardan sıyrılarak, üst üste gelme hatalarını önemli ölçüde azaltmaya yönelik heyecan verici yeni bir özellik olarak tasarlandı.
- Fly **AI** motoru, hem acemi kullanıcılar hem de deneyimli kullanıcılar için taramayı daha kolay ve daha iyi hale getirmeye kararlıdır.

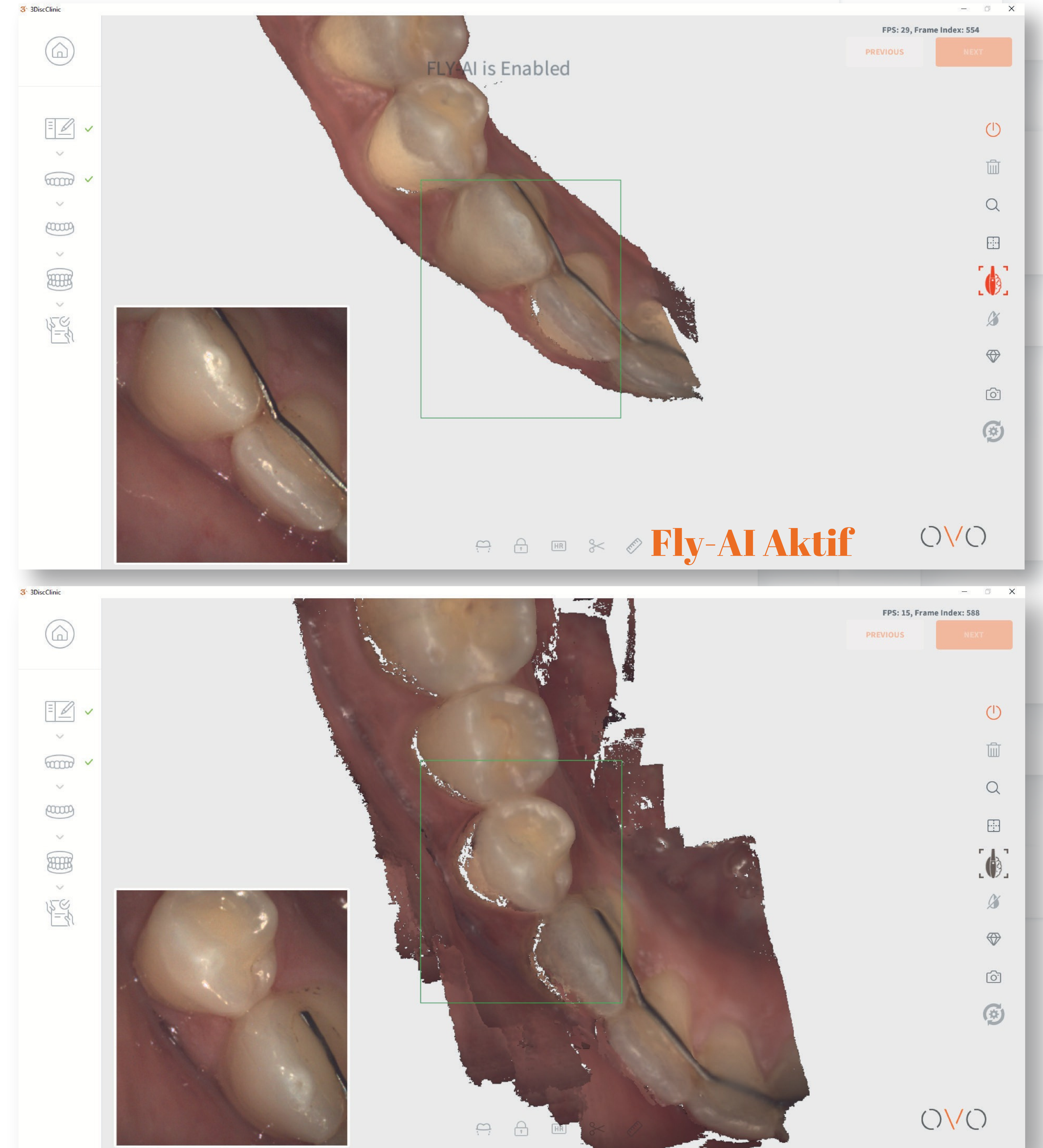

"FlyAI inanılmaz bir araç. Dudaklar, bukkal mukozalar, eldivenler veya diğer araçlar gibi gereksiz unsurları taramadan çıkararak daha sorunsuz taramaya olanak tanır. Bu, tarama deneyimini büyük ölçüde iyileştirir ve daha temiz sonuçlara yol açar. FlyAI ile tarama, hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor!"

Dr. Adolfo Lopes



"3DISC'in Heron model intraoral tarayıcısını neredeyse iki yıl kullanmanın ardından, yazılıma eklenen FlyAI uygulaması gerçekten oyun değiştirici oldu. Program inanılmaz derecede sofistike, hızlı, hatasız ve hassas taramaya olanak tanıyor. Genel olarak, tamamen etkilenmiş durumdayım ve FlyAI'in beklentilerimi aştığını güvenle söyleyebilirim."

Assistant Professor

Dr. Julija Zarkova Atanasova, Prosthodontist

"Tarayıcılara entegre edilen yeni yapay zeka özelliği, tarama sürecini kolaylaştırır ve günlük taramanın hızını artırır. Yeni FlyAI ile dijital diş hekimliği alanında deneyimsiz kullanıcılar için bile tarama sorunsuz olacak."

Dr. Alberto Mori

"Bunu harika buluyorum! 3Disc'teki Ar-Ge ekibine tam kredi! Tarama yaptığımda, yazılım yanlışlıkla görüntülenen eldivenleri, dudakları, dili ve yanakları dikkate almıyor. 3DISC tarayıcım hayatı daha da kolaylaştırıyor!"

Dr. Tanzeem Raees

Hastaların konforu için **kompaktlık, ergonomi ve hafiflik** en önemli özelliklerdir.



3DISC'in kanıtlanmış yenilikçi teknolojisi, ergonomik ve hafif tarayıcısıyla birleşerek tarama sırasında istikrar sağlar, sürekli hassas sonuçlara imkan tanır. 20mm tarama derinliği, düşük çıkıntılar ve diğer karmaşık tarama alanlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

250 KERE
OTOKLAVLANABİLME
YETENEĞİ

360°
DÖNME
YETENEĞİ

59 SANİYEDE
TEK ARKI TARAYABİLME
YETENEĞİ

250 kez otoklavlanabilir uçlarıyla, 3DISC; tarayıcımızda kullanılan malzemenin kalitesini gösteriyor.

TARAMA DERİNLİĞİ
20 mm

150 g
EN KÜÇÜK ve EN HAFİF




Hasta-klinik ile laboratuvar iletişimi hiç bu kadar **kolay entegre** edilmemişti.

- Klinikler ve laboratuvarlar arasında tek tıklamayla sorunsuz iletişim sağlanır.
- STL, OBJ, PLY gibi çeşitli formatlarda esnek dış aktarma seçenekleri.
- Tam entegre açık CAD/CAM sistemleri. (DWOS, Exocad vb.)
- Yerel olarak veya özel 3DiscCloud platformumuz aracılığıyla dış aktarma imkanı.

3DiscCloud

- Vakaya genel bakış ve takip
- Etkileşimli mesajlaşma ve tartışma
- Tüm kullanıcılar ve iş ortakları (laboratuvarlar) için kullanılabilir platform

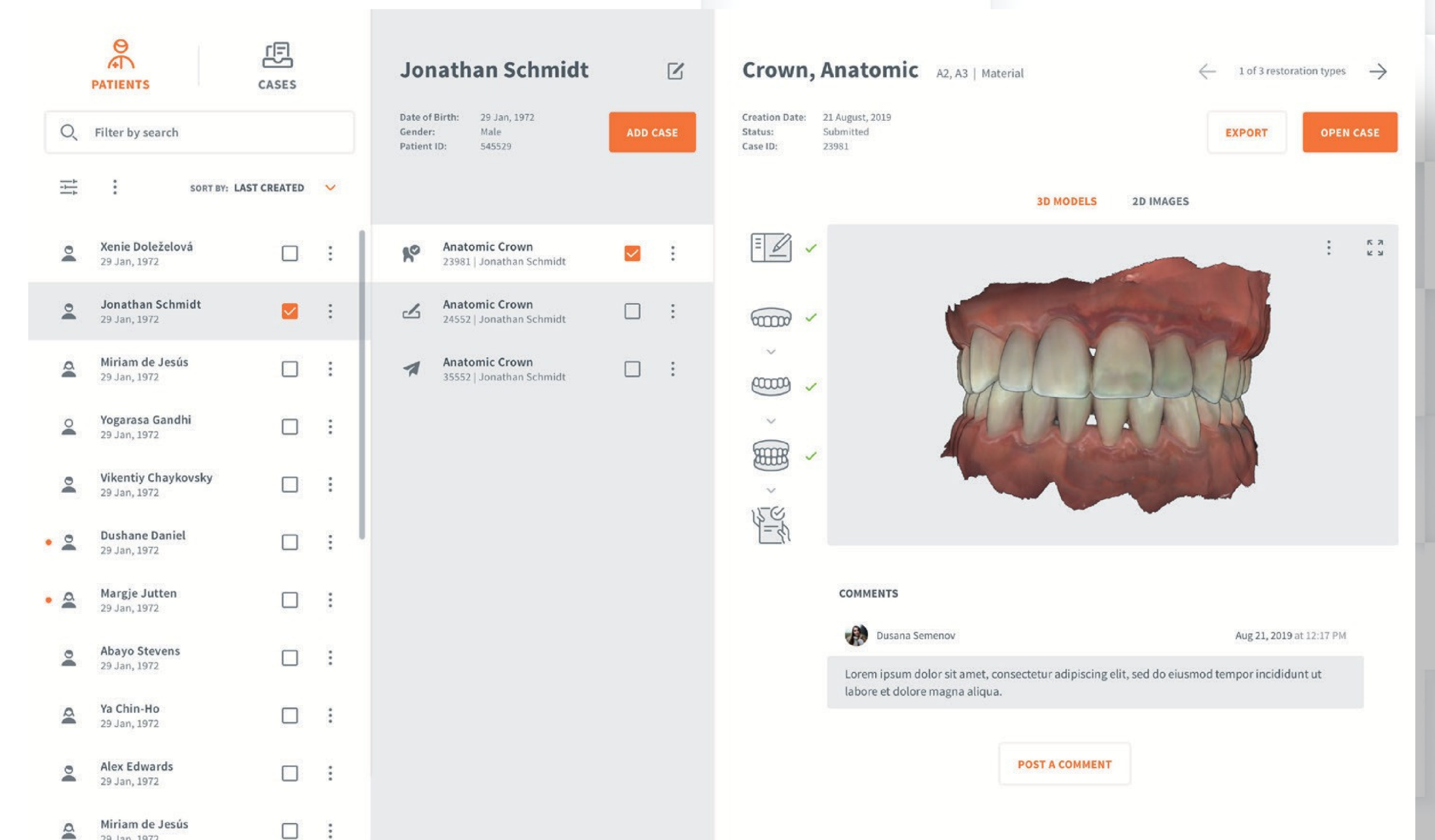

BTECH